

couture

Diamond Polishing Paste

NEDERLANDS • GEBRUIKSAANWIJZING

Couture™ Diamant polijstpasta

REF 390007 - Diamant polijstpasta

INHOUD
2,5g spuit plus 1 monster nylon applicatieborstel

PRODUCTBESCHRIJVING

- Universele extra fijne korrel diamantpasta voor natuurlijk, hoogglans polijsten van alle esthetische/composietoppervlakken in slechts één applicatie.
- Homogene en losse deeltjes vormen de ideale behandeling van composietoppervlakken en helpen voorkomen dat composietvulmiddelen worden getrokken of losgemaakt van het materiaaloppervlak.
- Pastaconsistentie is uniek ontworpen, zodat het coherent en spetterbestand blijft op het aanbevolen toerental van 6.000 rpm maximaal.
- Couture Diamant polijstpasta produceert de meest natuurlijk uitziende, mooi glanzende, hoge-reflectie-afwerkingen, wanneer deze volgens aanwijzingen wordt gebruikt.

GEBRUIKSINDICATIES

- Afsluitend polijsten en hoogglans voor alle oppervlakken van de esthetische/composiet tandheelkundige materialen.
- Kan ook worden gebruikt op email, porselein en alle andere esthetische vulmaterialen.

GEBRUIK

- Kan worden aangebracht met een nylonborstel of prophy cup.
- Oefen zeer lichte druk uit bij het gebruik Couture Diamond polijstpasta.
- Gebruik altijd lage snelheids-handstukken op het aanbevolen toerental van 6.000 rpm maximaal.
- De beste polijst- en oppervlakte-afwerking is aangebond bij slechts 15 seconden gebruik. Hierna worden de oppervlakken niet verbeterd.

OPMERKINGEN

- Gebruik de pasta niet nadat de houdbaarheid is verlopen.
- De kleur van de pasta kan van partij tot partij variëren door het gebruik van natuurlijk voorkomende grondstoffen; kleurverschil heeft echter geen invloed op de veiligheid van het product of de prestaties.
- Bewaren in een koelkast bij een temperatuur van 2-7°C (35-45°F) tussen toepassingen om een homogene consistentie van de pasta te behouden. Laat op kamertemperatuur komen voordat u de pasta gaat gebruiken.
- Om uitdroging te voorkomen moet de spuitdop onmiddellijk na gebruik goed worden vastgedraaid.
- Het wordt aanbevolen dat zowel de patiënt als de operator hun ogen beschermen tegen spetters en puin.
- Indien de pasta gedurende lange tijd ongebruikt is opgeslagen en droog lijkt, voeg dan een kleine hoeveelheid toe water om de juiste consistentie van het materiaal te herstellen.

NORSK • BRUKSANVISNINGER

Couture™ Poleringsbørste med diamanter

REF 390007 - Poleringspasta med diamanter

INNHOLD

- 2,5 g sprayte pluss 1 prøve på nylon påføringsbørste

PRODUKTBESKRIVELSE

- Universal ekstra fin pasta med diamanter for naturlig, høyglanspolering av alle estetiske/kompositt-overflater med kun en påføring.
- Homogene og deagglomererte partikler gir ideell behandling av kompositt-overflater og forhindrer at kompositt-fyllstoffer blir dratt eller frigjøres fra materialoverflaten.
- Pastaens konsistens er unikt designet slik at den forblir helhetlig og sprut-resistent ved anbefalte rotasjonshastighet på maks 6.000 rpm.
- Couture poleringspasta med diamanter gir det mest naturtr, høyglans, høyreflekterende resultat når den brukes som anvist.

BRUKSANVISNINGER

- Sluttpolering med skinnende høy glans for alle overflater av estetiske/kompositt dentalmaterialer.
- Kan også brukes på emalje, porselen og alle andre estetiske restaureringsmaterialer.

BRUK

- Kan påføres med en nylonbørste eller prophy cup.
- Bruk svært lett trykk når du bruker Couture poleringspasta med diamanter.
- Bruk alltid lavhastighets håndstykker ved anbefalt rotasjonshastighet på maksimalt 6.000 rpm.
- Beste polering og overflatefinish har blitt oppnådd ved bruk i kun 15 sekunder. Etter dette vil ikke overflaten forbedres.

MERKNADER

- Ikke bruk pastaen etter utløpsdato.
- Fargen på pastaen kan variere noe fra parti til parti grunnet bruk av naturlige råmaterialer; fargeforskjeller har imidlertid ingen betydning for produktets sikkerhet eller ytelse.
- Lagres i kjøleskap ved en temperatur mellom 35-45 °F (2 - 7 °C) mellom påføringer for å opprettholde en homogen konsistens på pastaen. Oppvarmes til romtemperatur før bruk.
- Lukk sprayteheten umiddelbart etter bruk for å unngå at pastaen tørker ut.
- Det er anbefalt at både pasienten og operatøren beskytter øynene mot sprut og smuss.
- Tilsett litt vann dersom pastaen lagres over lang tid, uten å brukes, for å unngå at den blir tørr.

SUOMI • KÄYTTÖOHJEET

Couture™ timanttkiillotuspastae

VIITE 390007 - Timanttkiillotuspasta

SISÄLTÖ

2,5 ruisku + 1 nailonharja tuotteen levittämiseen

TUOTEKUVAUS

- Yleiskäyttöinen, erittäin hienojakoinen timanttipasta kaikkien esteettisten/komposiittipintojen luonnolliseen kiillotukseen vain yhdellä kiillotuskerralla.
- Homogeeniset ja kokoonpuristumattomat hiukkaset mahdollistavat komposiittipintojen ihanteellisen käsittelyn ja auttavat estämään komposiittiyhteiden irtoamista materiaalin pinnasta.
- Pastan koostumus on suunniteltu ainutlaatuisesti siten, että se säilyy yhtenäisenä ja roiskeita kestäväenä suosittelulla pyörimisnopeudella, enintään 6 000 rpm.
- Ohjeiden mukaan käytettynä Couture-timanttkiillotuspasta muodostaa parhaat mahdolliset luonnollisen näköiset, voimakkaan kiiltävät ja heijastavat viimeistelypinnat.

KÄYTTÖAIHEET

- Kaikkien esteettisten/komposiittimateriaalipintojen loppukiillotukseen ja kirkastamiseen.
- Tuotetta voi käyttää myös emali- ja posliinipinnoilla, sekä kaikkien muiden esteettisten restauraatiomateriaalien kanssa.

KÄYTTÖ

- Tuote levitetään nailonharjalla tai kiillotuskupilla.
- Käytä Couture-timanttkiillotuspastaa vain kevyesti painamalla.
- Käytä käsiosaa aina alhaisella nopeudella. Suositeltu pyörimisnopeus on enintään 6 000 rpm.
- Paras kiilto ja pinnan viimeistely saadaan todistetusti vain 15 sekunnin käyttöajalla. Tämän ajan jälkeen pinta ei enää tule paremmaksi.

HUOMAUTUKSIA:

- Älä käytä pastaa sen kelpoisuusajan päättymisen jälkeen.
- Pastan väri voi vaihdella eri tuote-erien välillä johtuen luonnossa esiintyvien raaka-aineiden käytöstä. Värieroilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen turvallisuuteen tai käyttöominaisuuksiin.
- Säilytä jääkaapissa 2–7 °C (35–45 °F) lämpötilassa käyttökertojen välillä pastan tasaisuuden ylläpitämiseksi. Anna pastan palata huoneenlämpöön ennen käyttöä.
- Jotta pasta ei kuivuisi, sulje ruiskun suojus tiukasti heti käytön jälkeen.
- Suosittelemme, että sekä potilas että käyttäjä suojavat silmänsä roiskeilta ja jätöksiltä.
- Jos tuote on pitkään käyttämättömänä ja pasta näyttää liian kuivalta, lisää siihen hiukan vettä asianmukaisen koostumuksen palauttamiseksi.


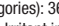
couture™
Advanced Finishing & Polishing  Finish

SAFETY DATA SHEET (SDS)

In accordance with Hazard Communication Standard (HCS), 29CFR 1910.1200(g), 2012 revision

SECTION I - PRODUCT / COMPANY IDENTIFICATION
Product Trade Name: Couture Diamond Polishing Paste
Product Name: Dental Diamond Polishing Paste
Manufacturer: CENTRIX, INC. Address: 770 River Road
City, State, Zip: Shelton, CT 06484 U.S.A.
Emergency or Information Telephone Numbers:
(203) 929-5582, Toll-Free: (800) 235-5862 (USA & Canada) Fax: (203) 929-6804
Date Revised: 9/2015

SECTION II – HAZARD IDENTIFICATION

Designation of Risk: Xi, irritant  
Special Details of Risk (R-categories): 36-38
Detrimental effects/symptoms: Irritant in case of eye, skin and inhalation contact.
Harmful if swallowed. May cause sensitization by skin contact.

SECTION III - COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS
Hazardous Components:

Name	%	CAS-No.	Symbol	R-Categories
Sodium Lauryl Sulfate	5 - 10	151-21-3	Xn/Xi	22/36/37/38
Irgisan	1-3	3380-34-5	Xn/Xi	22/36/37/38
Exact % content withheld due to trade secret restrictions.				

SECTION IV - FIRST AID MEASURES
Skin: Immediately wash skin with soap and water. If irritation occurs seek medical advice.
Ingestion: If swallowed do not induce vomiting. Give large quantities of water and milk. Seek medical attention.
Inhalation: Remove to fresh air. If breathing becomes difficult, contact a physician.
Eyes: Flush with plenty of water. Seek immediate medical attention by an Ophthalmologist.

SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES
The product is not considered to be a fire hazard. The information below is given for extinguishing a fire generated by other sources.
Suitable extinguishing media: Water, Chemical Foam, Carbon Dioxide, or Dry Chemical.
Forbidden extinguishing media: Not determined.
Special firefighting measures: None. Wear self-contained breathing apparatus.
Unusual fire and explosion hazards: Heat can cause polymerization with rapid release of energy.
Special protection equipment: Self Contained Breathing Apparatus if toxic fumes are generated.

SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES
Personal precautions: Adopt some precautions of section VII.
Environmental precautions: Keep spilled material out of sewers.
Reclaiming methods: Absorb spills with inert material - keep spilled material out of sewers.

SECTION VII - HANDLING AND STORAGE
Handling: Avoid unnecessary exposure. Storage: Room temperature. Containers: Supplied by manufacturer.
Incompatibilities: Avoid the contact with reducing and oxidizing agents, peroxides and amines.
Other precautions: Use according to directions. Avoid contact with eyes, skin and soft tissue.

SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION
General measures: Local Exhaust Ventilation: Good general ventilation should be sufficient to control airborne levels of vapors released by uncured material.
Limits: TWA: Not determined; TLV: Not determined.
Respiratory protection: Avoid prolonged or excessive breathing of vapors of uncured material.
Eye protection: Safety glasses or goggles.
Skin protection: Respect good personal hygiene practice. Avoid unnecessary exposure.
Hands protection: Impervious gloves.
Other equipment: Lab coat.

SECTION IX - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
Appearance: gummy gloss homogenous paste Color: brilliant turquoise pH: 5 to 6
Explosion limits: Not determined Odor: None
Water solubility: Insoluble Boiling point: Not determined Evaporation rate: Not determined
Flash point: Not determined Total aerobics count : < 102 CFU / g according to Ph. Eur. 5.1.4, category 2
Other Data: Not available or none.

SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY.
Stability: Stable if stored as directed.
Conditions to avoid: Heat, light, aging and contamination.
Materials to avoid: Reducing and oxidizing agents, peroxides and amines.
Hazardous decomposition products: Oxides of Carbon.
Hazardous polymerization products: May occur.

SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION.
Ingestion: Wash mouth with water and drink plenty of water
Eye contact: May cause irritation and damage if not removed promptly.
Skin contact: Prolonged or repeated exposure to uncured material may cause irritation or skin rash.
Inhalation: Prolonged or excessive inhalation may cause respiratory tract irritation.
Prolonged exposure: Not applicable.

SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION.
There is no specific information on the product. Use according to good working practice. Avoid releasing the product into environment.

SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS.
Dispose in accordance with local regulations.

SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION.
Additional Information: Not dangerous cargo.

SECTION XV - REGULATORY INFORMATION
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EEC DIRECTIVES.
Hazard Classification Symbol: Xn
R22 Harmful if swallowed.
R36-38 Irritating to eyes, respiratory system and skin.
S36 Wear suitable protective clothing.
Ingredients determining the label: Blend of multifunctional methacrylate

SECTION XVI - OTHER INFORMATION
Product handling is exclusively by dental specialists per instructions for use.

CAUTION: The above information is based on presently available data and to our best knowledge for handling the product under normal conditions. Any use of this product in any way not indicated on this document or using it together with any other process/ procedure will be exclusively under the user's responsibility.

	Finish
	
	
Questions & Information	
	TOLL FREE: 800.235.5862 USA & Canada 203.929.5582 FAX (203) 929-6804
	www.centrixcouture.com www.centrixdental.com
	Centrix Incorporated 770 River Road Shelton, CT 06484 USA
	Europe Dental-Contact Vertriebs OHG, Im Spiet 101, DE 26506 Norden
	Australia EMERGO AUSTRALIA Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street Sydney, NSW 2000, Australia

 [®]
Making Dentistry Easier.SM 